

**Lenz**

GARANTÍA  
3 AÑOS  
HOHE  
QUALITÄT

Produkte  
fürs leben

TECNOLOGÍA  
ALEMANA



# TENSIÓMETRO DIGITAL DE MUÑECA

**REF. BP-601**



Organización  
Mundial de la Salud

**ESCALA DE RESULTADOS**





TECNOLOGÍA  
ALEMANA



REF. BP-601

TENSÍOMETRO DIGITAL  
DE MUÑECA

El tensiómetro digital de muñeca LENZ realiza una medición rápida y precisa de la presión arterial y el pulso, tiene un funcionamiento sencillo de sólo 1 pulsador ideal para el control diario de la presión arterial.

Es automático, determina el inflado ideal, el valor promedio de los últimos tres registros. Solo tienes que utilizar las tiras de velcro para fijar fácilmente el monitor a tu muñeca y pulsar un solo botón, en menos de un minuto tendrás tus resultados en pantalla de una manera fácil y practica de leer en la pantalla LCD del tensiómetro.



CON

registro Invima



APROBADO

Sociedad Británica de Hipertensión



PANTALLA

LCD



DETECCIÓN

inteligente



INDICA

irregularidad cardíaca



RESULTADOS

estándares de la OMS

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	BP-601
Rango de presión	40 a 260 mmHg
Tamaño	8.0 * 6.5 * 3.4cm
Memoria	2x120 lecturas (sis-dia-pulso)
Rango de pulso	40 a 200 latidos /minuto
Metodo de medición	Oscilométrico
Pantalla	Digital (34x45 mm)
Rango de medición	SIS/DIA: 0 a 260 mmHg (incrementa en 1 mmHg) Pulso 40 a 200 latido/minuto
Exactitud	SIS/DIA: ± 3mmHg Pulso: ± 5% de lectura
Resolución de medición	1mmHg
Dimensiones	80x65x34±0.5
Potencia	2 x 1.5 V "AAA" (LR03)
Accesorios	1 brazalete, 2 baterías AAA, Manual de instrucciones
Peso	137 g ± 5g todo (completo)
Temperatura de operación	5~40°C/41~104°F
Humedad	15%~80% RH máximo
Temperatura de almacenamiento	-20~50°C/-4~122°F
Humedad de almacenamiento	10%~93%RH máximo

## COMPONENTES



- 1 Empaque y manual
- 2 Monitor y brazalete
- 3 Estuche (reposo de muñeca)
- 4 2 baterías AAA

- 1
- 2
- 3
- 4

TENSÍOMETRO DIGITAL  
DE MUÑECA

## PARTES




- 1 Brazalete
- 2 Botón de memoria
- 3 Botón de tiempo
- 4 Botón de apagado y encendido
- 5 Pantalla LCD


## USO



Colócatelo en la mano izquierda,  
de 0.5 a 1 cm de distancia de  
tu muñeca.

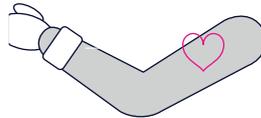

Siéntate, reposa tu brazo y  
flexiónalo, dejálo en posición  
recta al corazón.

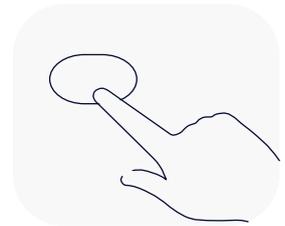

Oprime el botón de encendido  
para iniciar la medición.