


Luz, móvil, precisa y robusta:

El nuevo sistema de medición de altura seca 250 para bebés, niños y adultos


Seca ha desarrollado un sistema báscula móvil seca 250 en estrecha cooperación con organizaciones Internacionales. Es un sistema móvil que consiste en un infantómetro y estadiómetro que se adapta exactamente a los requerimientos especiales de los trabajadores de salud. La báscula seca 250 es fácil de transportar y de instalar y es tan robusto que proporciona mediciones precisas incluso bajo las condiciones más duras.

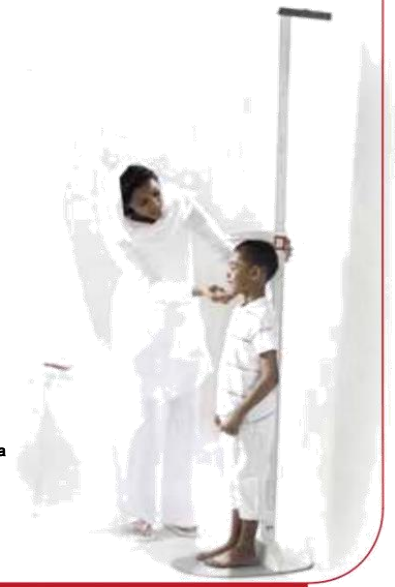

No importa dónde es el sitio, seca 250 está allí.

Es tan fácil:

01 La báscula seca 250 se puede llevar sobre el hombro o en una mochila.

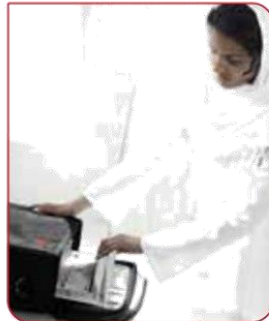

02 La configuración y montaje es sencillo:

- con el mecanismo plegable de la infantómetro.
- con el conjunto intuitivamente entendido de elementos estadiómetro.



03 Por lo que los bebés, niños y adultos se pueden medir de forma rápida, fácil y precisa.



seca 250 está listo

para el calor, el frío, la lluvia o la sequía.

El sistema móvil de medición de altura seca 250 para bebés, niños y adultos está especialmente diseñado para uso en áreas remotas. Puede ser transportado en una mochila y configurado sin instrucciones. Y lejos de la civilización que proporciona mediciones con una precisión clínica.



La barra de medición robusta se puede configurar en pocos pasos.

Amplio, correa acolchada y asa para facilitar su transporte, incluso en rutas largas.

Las bisagras del mecanismo práctico plegable están protegidos de la expansión excesiva y diseñados para soportar la torsión extrema.

La Innovación para trabajadores de la salud:

- Un paquete de medición de altura para bebés, niños y adultos.
- Desarrollado en colaboración con UNICEF.
- Especialmente diseñados para satisfacer las necesidades de los trabajadores de la salud.
- Almacenado en una bolsa robusta con correa para el hombro y el mango.
- Bien protegida en compartimentos acolchados prueba a prueba de polvo y agua.
- Gran estabilidad y precisión de la medición.
- superficies fáciles de limpiar.
- Almacenamiento sencillo.



La plaza de pie se desliza con suavidad y precisión a lo largo de los carriles de guía. La escala de medición es tan lacrímógena resistente que dura toda la vida.



infantómetro

El infantómetro móvil es lo suficientemente ligero para llevar en cualquier lugar. Gracias a su estabilidad mecanismo plegable, que se puede configurar de forma rápida siempre que sea necesario. El infantómetro tiene superficies lisas y fáciles de limpiar y una larga vida útil.

- Rango de medición: 10 - 100 cm
- Graduación: 0,1 cm
- Precisión: $\pm 0,2$ cm



El nivel integrado garantiza que el Estadiómetro - se encuentra correctamente en cualquier lugar.



estadiómetro

Este estadiómetro nunca se tambalea. Que está garantizado por una plataforma robusta, materiales altamente estables y un sistema de conexión inteligentemente diseñado. Es fácil de leer las mediciones de la escala de doble cara.

- Rango de medición: 20 - 210 cm
- Graduación: 0,1 cm
- Precisión: $\pm 0,2$ cm



Cualquier persona puede entender las simples instrucciones ilustradas para su uso en la tapa de la mochila.



Mochila

El infantómetro y estadiómetro se acomodan en compartimentos acolchados agua-apretados y a prueba de polvo en la bolsa de transporte a medida, que pueden utilizarse como una mochila o llevar en la mano o sobre el hombro.

- Dimensiones (An): 37 x 66 x 17 cm
- Peso total con contenidos: 6,6 kg