

RD900 NEOPUFF




REANIMADOR PARA LACTANTES

Neopuff, el reanimador para lactantes con pieza en T de Fisher & Paykel Healthcare, es un dispositivo de reanimación fácil de usar, adecuado para salas de dilatación y salas de partos, unidades de neonatología, quirófanos, medios de transporte, unidades de cuidados especiales para lactantes y unidades de cuidados intensivos neonatales.

Características:

Reanimación óptima

En los protocolos actuales de reanimación se recomienda el uso de un dispositivo con pieza en T, que pueda ofrecer todas las ventajas que supone conseguir una PIP objetivo controlada y suministrar una PEEP constante para contribuir a establecer la capacidad residual funcional (CRF) y aumentar el volumen pulmonar.

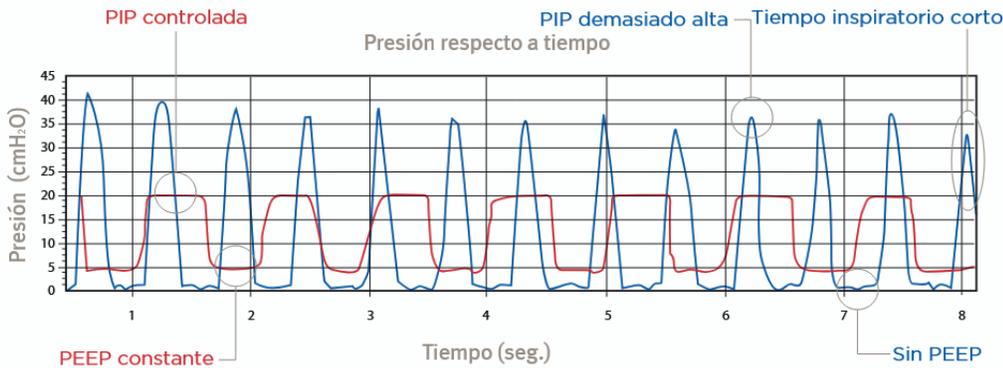

Fuente: datos obtenidos por un técnico de reanimación cualificado a partir de mediciones con simulador de reanimación, bolsa de autollenado y Neopuff.

Fácil De Usar

El nivel de experiencia, formación, concentración y fatiga del operador no afecta a la presión suministrada.

Funcionamiento Flexible

El Neopuff puede admitir y suministrar concentraciones de oxígeno del 21% al 100% procedentes de un medidor de caudal o un mezclador. El circuito con pieza en T puede conectarse a una máscara de reanimación para lactantes o a un tubo endotraqueal.

Suministro Preciso De Presión

El manómetro de indicación rápida permite asegurarse constantemente de la estanqueidad de la máscara, así como de la PIP y la PEEP suministradas.

Asistencia Respiratoria Temporal Alternativa

Se puede suministrar una PEEP constante como asistencia respiratoria durante el transporte o el cambio del circuito de ventilación.

