

seca 769

Báscula electrónica de columna con función BMI



- Utilizable en cualquier lugar gracias al funcionamiento por pilas.
- Fácil de transportar.
- Rentable y de bajo mantenimiento gracias a su bajo consumo.
- Funciones inteligentes para uso múltiple.

seca 769:

La solución inteligente para una utilización flexible.

En el área de la medicina, es necesario que la alta precisión y la funcionalidad bien elaborada vayan aparejadas con la rentabilidad. Desde hace más de cien años, seca desarrolla básculas y sistemas de medición innovadores que satisfacen estas exigencias de forma óptima. Porque sólo los elementos de trabajo ajustados específicamente a las necesidades de los médicos y del personal sanitario, que a la vez funcionen de forma rentable, realmente alivian la tarea en los hospitales, consultorios y centros de atención. Son condiciones que, indudablemente, reúne la pesapersonas electrónica de columna seca 769, de uso múltiple y flexible.



Funciones inteligentes para una utilización múltiple.


En hospitales y consultorios médicos es absolutamente necesario poder evaluar el estado nutricional del paciente. Para estos fines, la pesapersonas seca 769 ofrece una función IMC que mide el contenido de grasa corporal en relación a la estatura. La función auto-HOLD también alivia la tarea diaria: se ocupa de seguir indicando el resultado en la báscula ya descargada. Esto permite atender debidamente al paciente antes de anotar el peso. Con la función TARA, se compensan los pesos adicionales que no deben incluirse en el resultado de pesaje.



Para comprobar el BMI, simplemente se presiona una tecla.

Utilizable en cualquier sitio y fácil de transportar.

La pesapersonas seca 769 se puede utilizar en cualquier sitio, donde se necesite. Gracias a la alimentación por pilas no depende de la red eléctrica. Sin embargo, una pesapersonas de utilización flexible también debe ser fácil de trasladar: la pesapersonas seca 769 viene equipada con ruedas de marcha suave, para conducirla sin inconvenientes hasta donde se necesite.

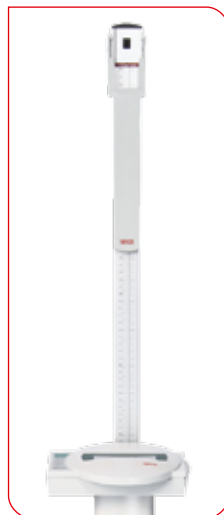

Con el tallímetro telescópico opcional, en muchas básculas de columna seca se pueden realizar el pesaje y la medición en una sola operación.

Especialmente rentable y de bajo mantenimiento.

La pesapersonas seca 769 trabaja con un consumo extremadamente bajo de energía, por lo cual es sumamente rentable. Gracias a esa característica, con esta pesapersonas de columna se puede realizar un enorme número de pesajes con un solo juego de pilas. La desconexión automática es otro de los factores de ahorro energético.

seca 769

Datos técnicos

- Capacidad: 200 kg / 450 lbs
- División: 100 g / 0.2 lbs
- Dimensiones (AxAxP): 294 x 831 x 417 mm / 11.6 x 32.7 x 16.4"
- Dimensiones plataforma (AxAxP): 272 x 75 x 280 mm / 10.7 x 3 x 11"
- Peso: 6.2 kg / 13.7 lbs
- Alimentación: Batería, red eléctrica opcional
- Funciones: TARA, auto-HOLD, BMI, conmutación kg/lbs, desconexión automática
- Opcional: Tallímetro seca 220 y seca 224, adaptador para red eléctrica seca 447, adaptador de corriente seca 400