


MICROPIPETETAS

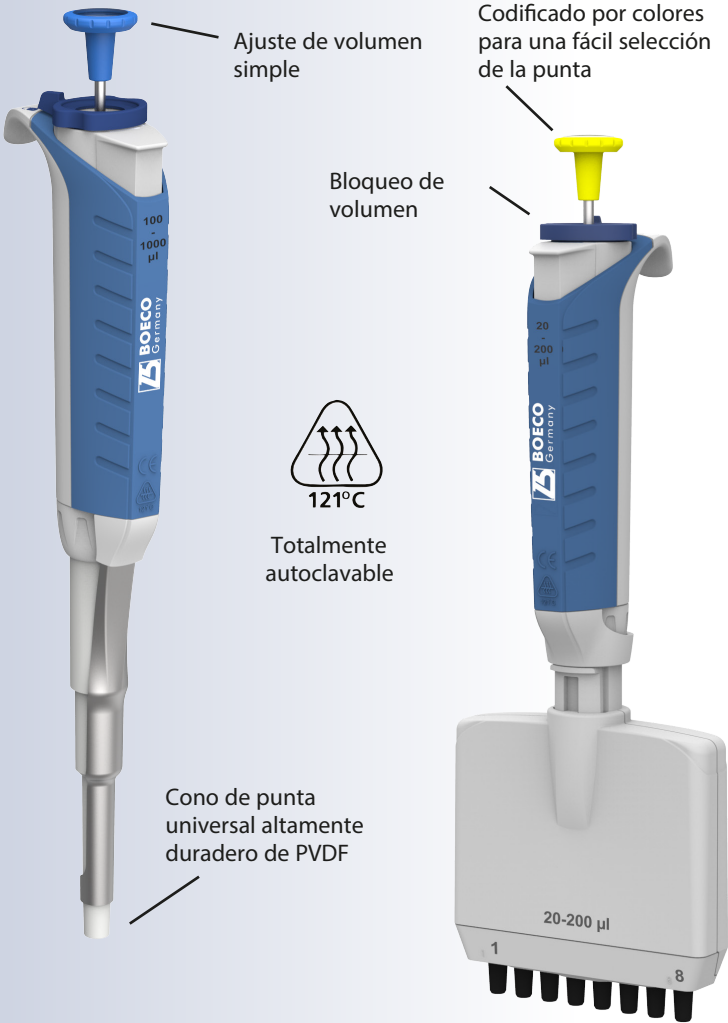


Nuestra nueva serie de micropipetas BOECO IP premium de mono y multicanales, son micropipetas de desplazamiento de aire con pistón asistido magnético y baja fuerza de inmersión, incluyen todas las características más avanzadas solicitadas por los investigadores.

- ▶ Totalmente autoclavable a 121°C (2 bar)
- ▶ Diseño ergonómico
- ▶ Diseño innovador de resorte y sello para uno de los requisitos de fuerza de inmersión más bajos
- ▶ Pistón asistido por imán para resultados precisos
- ▶ Experiencia sin fatiga potenciada por un ergonómico enfoque de diseño, exclusivo eyector de puntas con amortiguación y conveniente descanso para los dedos.
- ▶ Fácil calibración interna & limpieza sin herramientas
- ▶ Construido con material de alta durabilidad para mejor durabilidad y prevención contra la corrosión química y física.
- ▶ Bloqueo de volumen para evitar ajustes de volumen no deseados

Suministro:
BOECO IP Micropipeta, manual, certificado de calidad, herramienta de ajuste, tarjeta de garantía, soporte de montaje en estante, grasa de silicona, empaque de muestras de puntas.

Todas las pipetas fueron probados según ISO 8655 / DIN 12650 y han sido calibrados en un laboratorio acreditado ISO / IEC 17025

Fabricados bajo normas de calidad ISO 9001:2015 y ISO 13485:2016

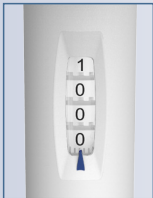

Grande y claro, Pantalla de 4 dígitos




Bloqueo de volumen para evitar ajustes de volumen no deseados



Cono de punta con resorte para menor tensión y ajuste de punta adecuado (solo multicanales)



Pistón asistido por imán para resultados precisos

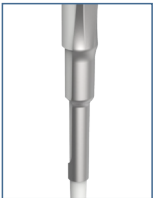

Mecanismo de eyección de puntas resistente a la corrosión con diseño exclusivo de absorción de impactos

BOECO SERIES IP, PREMIUM MICROPIPETETAS, DE VOLUMEN FIJO, CON EXPULSOR DE PUNTAS, TOTALMENTE AUTOCLAVABLE

Código	Volumen	Vol. prueba	Inexactitud	Imprecisión	Puntas
BOE 9320002	2,5 µl	2,5 µl	± 2,00 %	± 1,60 %	D,E,F
BOE 9320005	5 µl	5 µl	± 1,30 %	± 1,20 %	D,E,F
BOE 9320010	10 µl	10 µl	± 1,20 %	± 0,60 %	D,E,F
BOE 9320020	20 µl	20 µl	± 1,00 %	± 0,30 %	D,E,F
BOE 9320025	25 µl	25 µl	± 1,00 %	± 0,30 %	D,E,F
BOE 9320050	50 µl	50 µl	± 0,70 %	± 0,30 %	D,E,F
BOE 9320100	100 µl	100 µl	± 0,60 %	± 0,20 %	D,E,F
BOE 9320200	200 µl	200 µl	± 0,60 %	± 0,20 %	D,E,F
BOE 9320250	250 µl	250 µl	± 0,60 %	± 0,30 %	G,H,I
BOE 9320500	500 µl	500 µl	± 0,60 %	± 0,20 %	G,H,I
BOE 9321000	1000 µl	1000 µl	± 0,60 %	± 0,20 %	G,H,I
BOE 9322000	2000 µl	2000 µl	± 0,30 %	± 0,15 %	J
BOE 9325000	5000 µl	5000 µl	± 0,30 %	± 0,15 %	J
BOE 9321111	10000 µl	10000 µl	± 0,60 %	± 0,20 %	L

BOECO SERIES IP, PREMIUM MICROPIPETAS, AJUSTABLES, CON EXPULSOR DE PUNTAS, TOTALMENTE AUTOCLAVABLES

Código	Canales	Volumen	División	Vol. prueba	Inexactitud	Imprecisión	Puntas
BOE 9310002	1-ch	0,1 - 2,5 µl	0,002 µl	0,25 µl	±12,0 %	±6,00 %	A,B,C
				1,25 µl	±2,50 %	±1,50 %	
				2,5 µl	±2,50 %	±0,70 %	
BOE 9310010	1-ch	0,5 - 10 µl	0,02 µl	1 µl	±2,50 %	±1,50 %	A,B,C
				5 µl	±1,50 %	±0,80 %	
				10 µl	±1,00 %	±0,40 %	
BOE 9310020	1-ch	2 - 20 µl	0,02 µl	2 µl	±3,00 %	±1,50 %	D,E,F
				10 µl	±1,20 %	±0,60 %	
				20 µl	±0,90 %	±0,30 %	
BOE 9310050	1-ch	5 - 50 µl	0,1 µl	5 µl	±2,00 %	±2,00 %	D,E,F
				25 µl	±0,80 %	±0,40 %	
				50 µl	±0,60 %	±0,30 %	
BOE 9310100	1-ch	10 - 100 µl	0,1 µl	10 µl	±3,00 %	±1,00 %	D,E,F
				50 µl	±1,00 %	±0,30 %	
				100 µl	±0,80 %	±0,20 %	
BOE 9310220	1-ch	20 - 200 µl	0,2 µl	20 µl	±2,50 %	±0,70 %	D,E,F
				100 µl	±0,70 %	±0,30 %	
				200 µl	±0,60 %	±0,20 %	
BOE 9311100	1-ch	100 - 1000 µl	1 µl	100 µl	±3,00 %	±0,60 %	G,H,I
				500 µl	±1,00 %	±0,20 %	
				1000 µl	±0,60 %	±0,20 %	
BOE 9315000	1-ch	500 - 5000 µl	10 µl	500 µl	±2,40 %	±0,60 %	J
				2500 µl	±1,20 %	±0,25 %	
				5000 µl	±0,60 %	±0,20 %	
BOE 9311111	1-ch	1000 - 10000 µl	20 µl	1000 µl	±3,00 %	±0,60 %	L
				5000 µl	±0,80 %	±0,20 %	
				10000 µl	±0,60 %	±0,15 %	

BOECO SERIES IP PREMIUM PIPETAS MULTICANALES, AJUSTABLES CON EXPULSOR DE PUNTAS, TOTALMENTE AUTOCLAVABLES

Código	Canales	Volumen	División	Vol. prueba	Inexactitud	Imprecisión	Puntas
BOE 9308010	8-ch	0,5 - 10 µl	0,02 µl	1 µl	±8,00 %	±5,00 %	D,E,F
BOE 9312010	12-ch			5 µl	±4,00 %	±2,00 %	
				10 µl	±2,00 %	±1,00 %	
BOE 9308050	8-ch	5 - 50 µl	0,1 µl	5 µl	±3,00 %	±2,00 %	D,E,F
BOE 9312050	12-ch			25 µl	±1,50 %	±1,00 %	
				50 µl	±1,00 %	±0,70 %	
BOE 9308100	8-ch	10 - 100 µl	0,1 µl	10 µl	±3,00 %	±2,00 %	D,E,F
BOE 9312100	12-ch			50 µl	±1,00 %	±0,80 %	
				100 µl	±0,80 %	±0,30 %	
BOE 9308300	8-ch	30 - 300 µl	0,2 µl	30 µl	±3,00 %	±1,00 %	F
BOE 9312300	12-ch			150 µl	±1,00 %	±0,50 %	
				300 µl	±0,60 %	±0,30 %	

ACCESORIOS

Código	Descripción
BOE 9300006	Soporte tipo carrusel para 6 micropipetas IP-Series
BOE 9600006	Soporte linear, acrílico, gris, para hasta 6 micropipetas BOECO Series SA/GP/IP
BOE 9600050	Depósito de reactivo desechable, capacidad 50 ml pared graduada, de poliestireno Ideal para trabajar con pipetas multicanales. Paquete de 100 unidades

