


Equipo de Organos 777-SM2XXX



Welch Allyn

Oftalmoscopio Coaxial

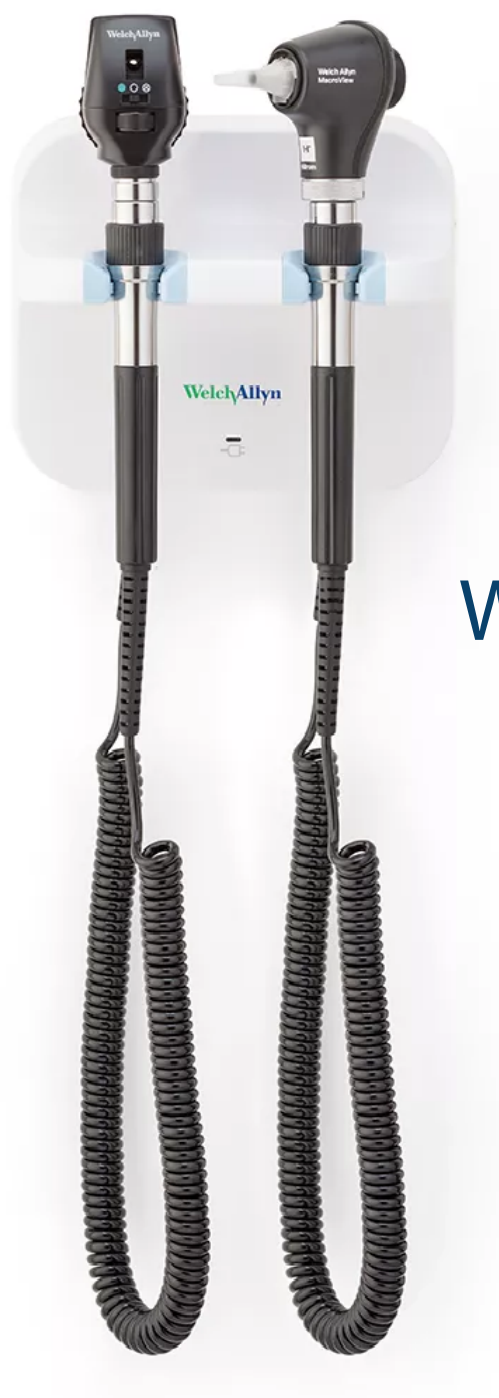

11720

El sistema de visión Coaxial Welch Allyn[®] patentado facilita la oftalmoscopia al permitir una entrada más fácil en el ojo, un campo de visión más amplio y reducción del resplandor en comparación con los oftalmoscopios estándar.

- El bombillo halógeno HPX[®] produce una luz para ver el color real del tejido y para obtener un rendimiento de larga duración
- El sistema óptico Coaxial produce un punto sin sombras, un mejor ingreso en las pupilas no dilatadas y un campo de visión más amplio en comparación con oftalmoscopios estándar
- Detecta abrasiones de la córnea con el filtro azul cobalto
- El filtro polarizador prácticamente elimina el reflejo de la córnea
- 18 combinaciones de aberturas/filtros exclusivos para una mayor versatilidad
- El filtro libre de rojo se puede utilizar con cualquier abertura
- 28 lentes de enfoque con una gama de dioptrías de -25 a +40

11720 Oftalmoscopio Coaxial (cabezal solamente)

Oftalmoscopio Coaxial - Accesorios

04900-U Bombillo halógeno

04900-LED Bombillo de LED para Oftalmoscopios Tradicionales

ABERTURAS PARA: Oftalmoscopio Coaxial, Oftalmoscopio Coaxial AutoStep[®] y Oftalmoscopio Coaxial Plus Prestige[™] (modelos 11720, 11730 y 11735)



Micropunto

Permite el ingreso rápido en pupilas pequeñas no dilatadas.



Pequeña

Ofrece una excelente vista del fondo del ojo a través de una pupila no dilatada.



Grande

Estándar para una pupila dilatada y un examen general del ojo.



Fijación

Tiene un punto de mira graduado para medir la fijación excéntrica o localizar las lesiones.



Filtro de Cobalto

Se utiliza con fluoresceína para ver lesiones pequeñas, abrasiones y objetos extraños en la córnea.



Ranura

Utilizada para determinar los niveles de lesiones y tumores.



Filtro Libre de Rojo

Excluye del campo del examen los rayos rojos para una identificación fácil de las venas, arterias y fibras nerviosas.

Lentes

28 lentes
Dioptrías de -25 a +40

Filtros

Polarización lineal
cruzado, libre de rojo
y azul cobalto

Sistema Óptico

Óptica Coaxial

EXPANDE
TU VISIÓN

Disfruta de una visión más amplia y brillante con nuestros otoscopios MacroView y MacroView Plus de Welch Allyn. Mejora los exámenes con el otoscopio MacroView Plus y la opción de capturar y compartir imágenes del oído para su revisión. Ambos dispositivos funcionan con fuentes de alimentación Welch Allyn 3.5V existentes

Combina el otoscopio MacroView con los espejos desechables LumiView™ Clear de Welch Allyn para obtener imágenes más brillantes.

Guarda y comparte imágenes del oído con el dispositivo MacroView Plus combinado con nuestro iExaminer® SmartBracket™ y la aplicación iExaminer Pro.




Especificaciones	Otoscopio Macroview Plus	Otoscopio Macroview Estándar
Número de modelo	238-3	238-2
Preparado digitalmente para iExaminer	Sí	No
Garantía	5 años	1 año
Altura x Ancho x Profundidad	7 cm alt. x 4.5 cm anch. x 5.5 cm prof.	
Peso	115 gramos	
Otoscopia neumática sellada	Sí	
Tipo de iluminación	Anillo de fibras ópticas	
Tipo de lámpara	LED SureColor™	
Vida útil de la lámpara, evaluación	60+ años en base al uso típico ¹	
Campo de visión	~3 veces la de un otoscopio de una sola lente, como el 250-2, de estilo estándar.	
Ampliación	~5X	
Diseño sin enfoque	La longitud focal extendida prácticamente elimina la necesidad de focalizar en el otoscopio de visión amplia	
Salida total de la luz	5200 lux; 2.5 veces más brillante que los alcances halógenos tradicionales.	
Color	Índice de rendimiento cromático (IRC): 95 típico; R9: 90 típico; Temperatura de color: 3400K-4500K	
Garantía de LED	7 años	
Optimizado para el mango de iones de litio 719-3	Permanece brillante durante toda la vida útil de la batería (a diferencia de los diseños más antiguos que se atenúan con el uso); no cambia de color con la atenuación (a diferencia del halógeno)	

3X VECES MÁS GRANDE
Área de visualización



Otoscopio
Convencional

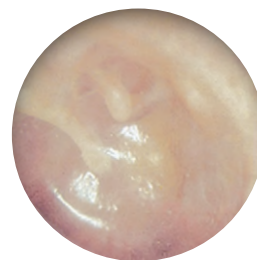

Otoscopio
Macroview Plus

Equipo de Órganos

Especificaciones	Mango de alimentación de ion de litio Plus con cargador USB Welch Allyn *	Cargador universal de escritorio Welch Allyn *
Número de modelo	719-3	719-DSK
Altura x Ancho x Profundidad	14 cm x 3 cm x 3 cm	10 cm x 19 cm x 11 cm
Peso	140 gramos	660 gramos
Compatibilidad	Cargador universal de escritorio 719-DSK Welch Allyn® ; cargadores 71140	Mangos 71140, 719-3, 71910, 71670. Los modelos 12800 y 22800 se utilizan con la cubierta del adaptador 71249
Cargador integrado	USB-C	—
Garantía	Dos años	Un año
Tiempo de funcionamiento	5.5 horas; aproximadamente 660 exámenes de 30 segundos	—
Tipo de batería	Ion de litio	—
Tiempo de carga rápida USB (0-75%)	90 minutos	—
Cable de alimentación y opciones de cable	USB-719	Cable a tierra formado por 3 conductores AWG18, 6 pies de largo, de grado médico, desmontable con entrada IEC60320
Entrada	—	100-240V, 50-60 Hz, 100mA máximo, Clase I, Funcionamiento continuo
Salida	—	2.4 V-4.0 V DC 80mA máximo